

FRAXX SYSTEM

• INNOVATION • QUALITÉ • PRECISION
• EXPERIENCE • EFFICACITÉ



4 MHz
HIGH-FREQUENCY
TECHNOLOGY



www.biomedcorp.fr



06.38.68.84.32



230 rue du faubourg saint-honoré, loktal75008@gmail.com
75011, Paris



FRAXX

Le système FRAXX, avec son contrôle exclusif SmartShot de tir fractionné aléatoire, utilise la technologie de radiofréquence (RF), délivrant une énergie subablative de manière précise. Cette technologie agit de façon significative sur le derme tout en causant des dommages minimes à l'épiderme.




Grâce à sa fonction unique de distribution aléatoire de l'énergie, appelée SmartShot, le système FRAXX atteint un temps de relaxation thermique parfait, préservant les tissus adjacents aux micro-points vaporisés, totalement intacts et sains, favorisant ainsi la néocollagénèse.

Son effet stimule la régénération dermique au niveau de l'interface papillaire-réticulaire en activant les fibroblastes, ce qui conduit à la synthèse de collagène et de fibres élastiques, ainsi qu'à la régénération épidermique facilitée par la migration des kératinocytes.

- Effet de régénération et de raffermissement : la régénération de la peau se produit grâce à la contraction et au renouvellement du collagène.
- Pas de formation de croûtes importantes : contrairement à la dermabrasion et aux peelings profonds, la radiofréquence micro-fractionnée génère de micro-croûtes qui disparaissent généralement de la zone traitée entre cinq et sept jours après le traitement.
- Temps d'arrêt minimal (temps de récupération) : la récupération est rapide, permettant aux patients de reprendre leurs activités quotidiennes presque immédiatement.

ELECTRODES MULTI-AIGUILLES LIMA

- - **Blépharoplastie non chirurgicale**
- - **Traitement des poches et cernes sous les yeux**

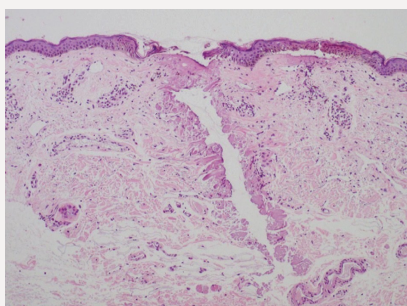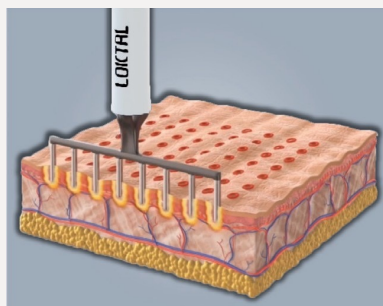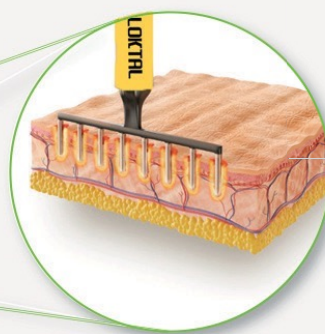

MODE CHIRURGICAL :

La technologie FRAXX offre un effet doux et non traumatisant avec une coupe et une coagulation précises grâce à l'énergie électromagnétique dans la gamme des Mégahertz (MHz). La chaleur latérale générée dans les tissus à cette fréquence est significativement plus faible que celle produite par les équipements laser. Les tissus adjacents ne subissent aucun dommage thermique et les incisions sont de haute qualité, comparables à celles réalisées avec une « lame froide ».

L'utilisation de l'énergie électromagnétique garantit une excellente qualité d'incision avec un saignement minimal, une cicatrisation rapide, une réduction des cicatrices hypertrophiques, un inconfort postopératoire minimal et des résultats esthétiques optimaux.

4 MODES D'UTILISATION:

FRAXX	PULSED
SURGERY	SINGLE PULSE

FRAXX Menu Principal



Electrosurgical Pen with
Dual-Button Activation
Optional


BLÉPHAROPLASTIE HAUTE FRÉQUENCE



Courtesy of Dr. David Araf.



Electrosurgical Pen with
Foot Pedal Activation

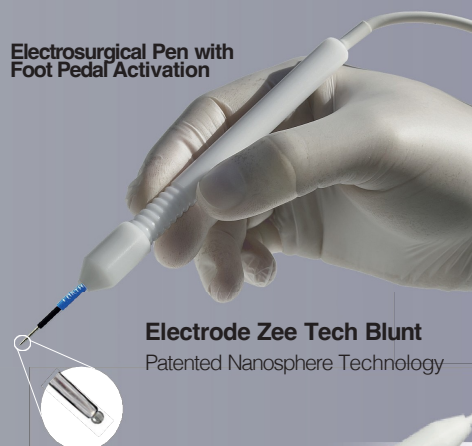




Electrode Zee Tech Blunt
Patented Nanosphere Technology




Bipolar Forceps




"ELECTRODE FRAXX SKIN"

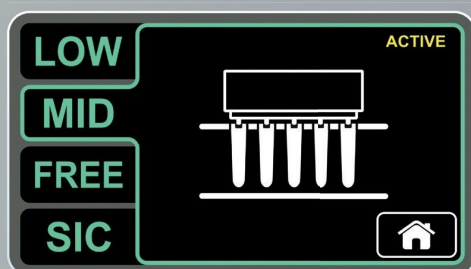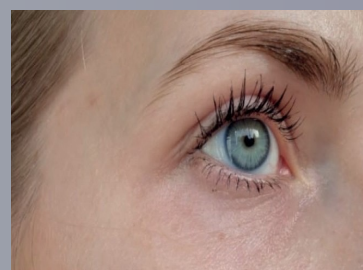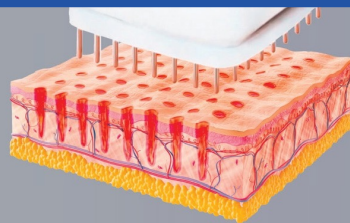

Mode Medium

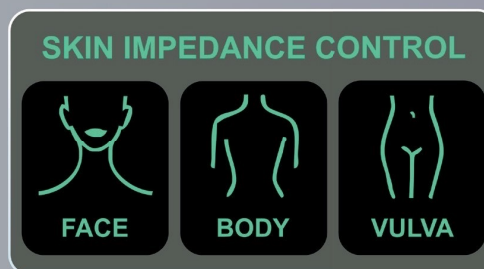

SIC Mode: Skin analysis through Bioimpedance reading

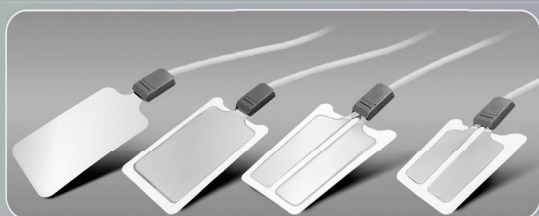

PLAQUE NEUTRE

- - Trois options de plaque neutre
- - Protection contre les chocs électriques ou les brûlures
- - Système de surveillance avec alarme sonore et lumineuse en cas de défaut de contact
- - Réutilisable – Réduit les coûts des procédures
- - Adhésif jetable (optionnel)



WATERPROOF FOOT PEDAL

- - Pédale triple avec protection contre les courts-circuits et les chocs électriques
- - Système de coupe/coagulation et commutation monopolaire/bipolaire

GRANDES OPTIONS D'ÉLECTRODES

BLADE ELECTRODES



ACEL0132 Electrosurgical Electrode
Micro Ball Ø 1mm 45°



ACEL0133 Electrosurgical Electrode
Ball Ø 1mm



ACEL0134 Electrosurgical Electrode
Ball Ø 2mm 45°



ACEL0135 Electrosurgical Electrode
Ball Ø 2mm




ACEL0138 Electrodo Eletrocirúrgico.
Ball Ø 5mm.



ACEL0139 Electrosurgical Electrode
Ball Ø 3mm, Straight.
For Coagulation and Vaporization.

BLADE ELECTRODES

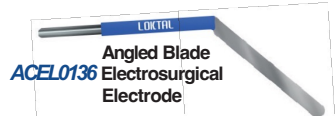

ACEL0136 Angled Blade
Electrosurgical
Electrode



ACEL0137 Short Straight Blade
Electrosurgical Electrode

HAND ELECTRODES



ACEL0140 Electrosurgical Electrode
Loop Ø 5mm, Straight.
For Biopsy and Lesion Excision.



ACEL0142 Electrosurgical Electrode Loop
Ø 7mm, Straight. For Biopsy
and Lesion Excision.



ACEL0143 Electrosurgical Electrode Loop
Ø 12mm, Straight. For Biopsy
and Lesion Excision.



ACEL0144 Electrosurgical Electrode
Triangular Loop, 9mm x 9mm x 9mm,
Straight. For Biopsy and Lesion
Excision (Shaving).



ACEL0145 Electrosurgical Electrode
Square Loop, 10mm x 10mm, Straight.
For Biopsy and Lesion Excision.

NEEDLE ELECTRODES



ACEL0141 Universal Electrosurgical
Electrode for Cutting,
Adjustable Depth
(replaces the cold blade).



ACEL0236 Electrosurgical
Electrode with Angled
ACEL0237 Micro Incision 45°, 50mm
and 75mm in length.



ACEL0238 Electrosurgical Electrode
with Precision Straight
Incision, 50mm and
ACEL0239 75mm in length.

LIMA MULTINEEDLE ELECTRODES



ACEL1460 LIMA 8® Multi-Needle Electrode
Needle Length 1mm.



ACEL1456 LIMA 8® Multi-Needle Electrode
Needle Length 2mm.

ELECTROSURGICAL ELECTRODE




ACEL0805 Electrode Zee Tech Blunt
Patented Nanosphere Technology



ELECTRODE FOR LACRIMAL DUCT OBSTRUCTION



ACEL1507
Flexible Electrode for Lacrimal Duct

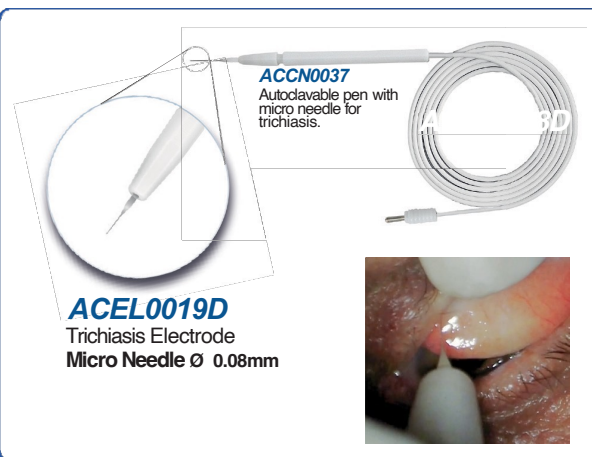

ACEL0019D
Trichiasis Electrode
Micro Needle Ø 0.08mm

ACCN0037
Autoclavable pen with
micro needle for
trichiasis.

"INNOVATION, PRÉCISION, SÉCURITÉ, EXPÉRIENCE et QUALITÉ"

Depuis plus de 35 ans, Loktal développe et produit la technologie la plus avancée dans le domaine des équipements haute fréquence dans la gamme des Mégahertz (MHz) au Brésil. Notre histoire a commencé en 1991, lorsque des médecins brésiliens déterminés, en collaboration avec Loktal, ont participé à la recherche et au développement du premier équipement.

Bien que nous ayons plus de 35 ans d'expérience dans les chirurgies utilisant la radiofréquence, des études approfondies sont toujours menées lors du développement d'un nouveau modèle. À cette fin, nous faisons appel à des universités accréditées et à plusieurs spécialistes renommés pour évaluer les résultats et démontrer l'efficacité.

Aujourd'hui, Loktal est présent dans plus de 35 pays répartis sur cinq continents et travaille sans relâche pour améliorer ses produits. Notre objectif principal est d'offrir des équipements et des technologies qui surprennent et dépassent les attentes des médecins et des patientes, grâce à des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie des femmes dans le monde entier !

PARLEZ À LIA (Loktal Intelligence Artificielle).

Toujours en quête d'innovation, Loktal est heureux d'annoncer l'arrivée de LIA, notre nouvel assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle, désormais disponible via WhatsApp !

Dans le but d'offrir un service encore plus efficace et personnalisé, LIA est prêt à répondre à vos besoins rapidement et avec précision.

Il vous suffit de scanner le QR CODE sur le côté, ou d'ajouter le numéro de Loktal à votre WhatsApp au +55 (11) 3722-0345, et LIA sera prêt à vous assister.

