

NeoGenEVO



**NEO
GEN**
Technologie du plasma d'azote



Régénération de la peau

Resurfaçage de la peau

Raffermissment de la peau

Pour le traitement efficace de :

Cicatrices d'acné*

Papillomata viral

Kératoses actiniques*

Kératoses séborrhéiques

Lésions cutanées superficielles

Rides et rhytides
(faciales et non faciales)

Présentation de NeoGenEVO

Cliniquement prouvé pour les conditions esthétiques et dermatologiques

Avec plus de 200 000 traitements effectués et de nombreuses études et articles publiés, la technologie de régénération cutanée par plasma d'azote de **NeoGen** est approuvée par le CE* pour deux indications et par la FDA** pour traiter simultanément sept indications approuvées.

Remodelage des tissus profonds pour le corps et le visage

Contrairement aux technologies fractionnées, **NeoGenEVO** traite l'ensemble de l'architecture de la peau sans îlots non traités, ce qui contribue à améliorer la laxité, la couleur, la texture et le tonus de la peau, ainsi qu'à éliminer les lésions cutanées précancéreuses, le tout sans ligne de démarcation.

Large gamme d'énergie pour des procédures hautement personnalisables

Les médecins peuvent personnaliser les paramètres en fonction des résultats souhaités et des attentes de leurs patients, avec des protocoles allant de "sans douleur, sans temps d'arrêt" à un résultat transformationnel, équivalent à un traitement ablatif complet au CO2, avec un temps de récupération réduit.





Alternative moins invasive à la blépharoplastie et au lifting du visage


Offrir une alternative non chirurgicale aux patients qui ne sont pas prêts à s'engager dans le coût ou les implications d'une intervention chirurgicale, ou un traitement complémentaire pour renforcer l'effet de procédures cosmétiques plus complexes.

Traite efficacement et en toute sécurité les types de peau I à IV

Système idéal pour traiter les types de peau plus foncés de ce spectre, NeoGenEVO offre aux cliniciens une large gamme d'énergie pour créer des protocoles de traitement sur mesure, adaptés au type de peau et aux attentes du client.

Non-ablatif, traitement non abrasif

Après le traitement, l'épiderme traité agit comme un pansement naturel qui protège contre infection et cicatrisation accélérée, notamment par rapport à la thérapie au laser qui présente un risque inhérent de complications.

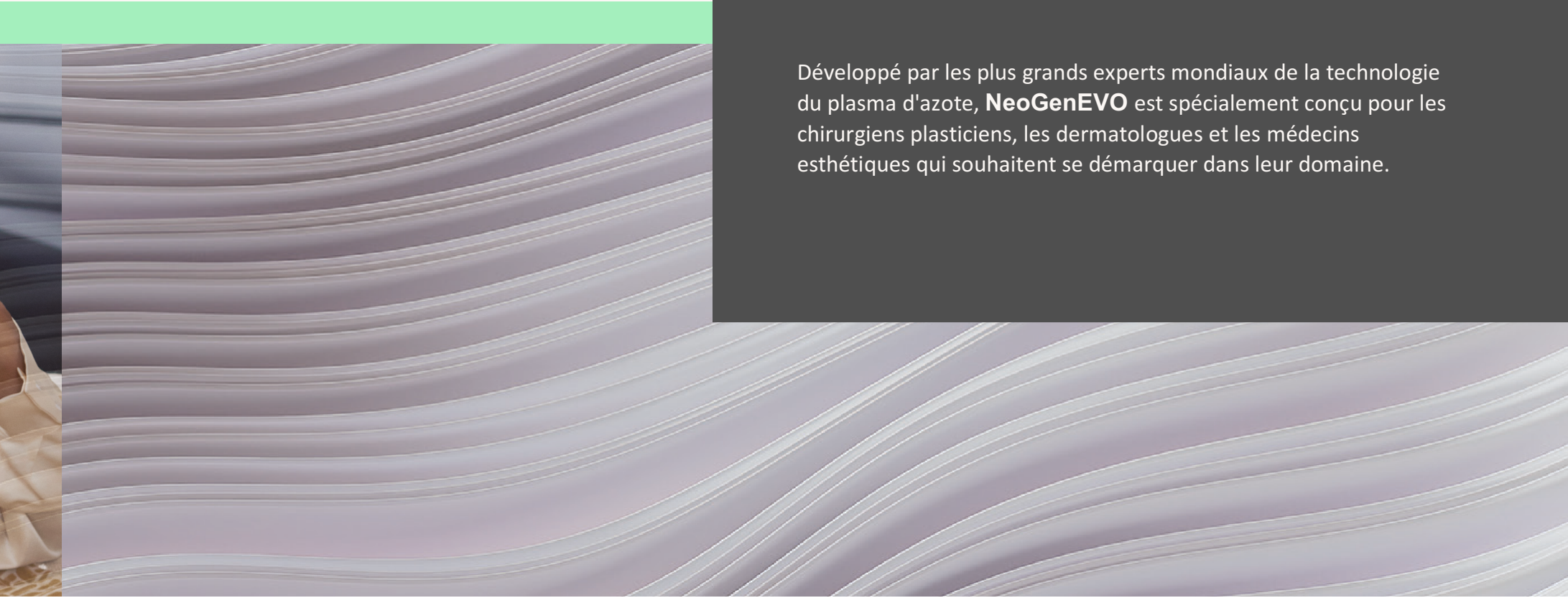

Développé par les plus grands experts mondiaux de la technologie du plasma d'azote, **NeoGenEVO** est spécialement conçu pour les chirurgiens plasticiens, les dermatologues et les médecins esthétiques qui souhaitent se démarquer dans leur domaine.


La science derrière les résultats

Remodelage unique des tissus en profondeur avec cicatrisation rapide

La technologie du plasma d'azote permet de chauffer de manière contrôlée l'architecture de la peau, stimulant ainsi une réponse physiologique significative, sans créer de plaie ouverte. Contrairement aux technologies ablatives, il n'y a pas de vaporisation ou de carbonisation de l'épiderme au moment du traitement.

NeoGenEVO convertit l'azote gazeux en plasma, le quatrième état de la matière. Le plasma sort de la pièce à main sous forme d'impulsions contrôlées et chauffe rapidement les tissus par un transfert d'énergie thermique.

L'énergie unique délivrée par **NeoGenEVO** est non fractionnée et ne dépend pas d'un chromophore pour son absorption. Cela permet une absorption uniforme de l'énergie, garantissant un traitement cohérent de la peau. À des énergies élevées, elle permet également une amélioration significative du volume.

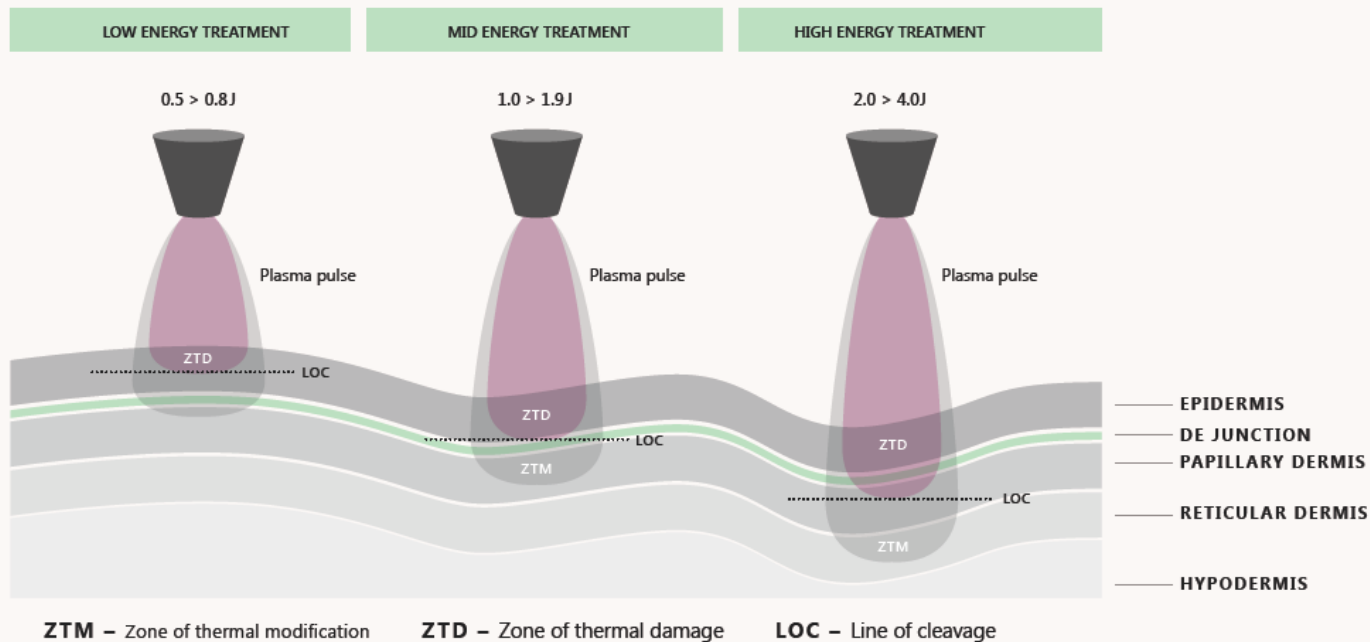

La chaleur perturbe la structure de la peau et force le derme à se régénérer, avec des résultats exceptionnels.

Entre la Zone de Dommage Thermique (ZTD) et la Zone de Modification Thermique (ZTM), une ligne de clivage devient évidente, où le nouvel épiderme se forme. NeoGenEVO permet au praticien de contrôler la profondeur de l'épiderme. du décolleté en ajustant le niveau d'énergie délivré à la peau.

Résultats régénérateurs durables

Les études cliniques montrent une néocollagénèse et une réduction de l'élastose qui se poursuivent plus d'un an après le traitement, et des résultats qui durent des années.

Traiter en toute sécurité la région périorbitaire

Traiter directement les paupières, jusqu'à la ligne des cils, et la zone périorbitaire plus large sans avoir recours à des protections oculaires pour réduire la laxité de la peau et obtenir un teint plus uniforme.

Réduire l'apparence des cicatrices

L'énergie thermique stimule la production de collagène 3D tout en faisant resurgir la peau, révélant une peau d'apparence plus saine avec un tonus et une texture améliorés, et minimisant ainsi la visibilité des cicatrices.

Traitement hautement personnalisé pour des résultats optimaux

NeoGenEVO offre une large gamme d'énergie de 0,5 à 4,0 joules, ce qui permet un traitement sur mesure pour répondre aux besoins du patient. attentes en termes de résultats et de temps de récupération. Que le patient opte pour un traitement à faible énergie sans temps d'arrêt ou pour un traitement à plus haute énergie avec des résultats transformateurs.

Tous les traitements peuvent également être combinés avec d'autres modalités pour des protocoles sur mesure afin de mieux répondre aux besoins des clients.



(4) TRAITEMENT DE LA RÉGION DES YEUX

(1 & 2) CICATRICES D'ACNÉ

(1 & 3) PAPILLOMES VIRAUX

(1 & 3) KÉRATOSE SÉBORRHÉIQUE

(1 & 2) KÉRATOSE ACTINIQUE

(1 & 3) RIDES - LÉGÈRES MODÉRÉES ET SÉVÈRES

(1 & 3) LÉSIONS PIGMENTAIRES SUPERFICIELLES

(1 ET 3) RIDES NON FACIALES

(1) Indications autorisées par la FDA

(2) Indications médicales certifiées CE1639

(3) Indications non médicales déclarées CE

(4) Autres indications prouvées efficaces sur une base préclinique développée et utilisée par les praticiens de NeoGen

Des
traitements sur
mesure pour
des résultats
incroyables
résultats, sans
compromis sur la
sécurité



Changez le visage de votre entreprise

NeoGenEVO est un choix évident pour aider à augmenter les revenus de votre clinique, en assurant un retour rapide sur votre investissement. Qu'il s'agisse de cibler les signes du vieillissement, de traiter des affections dermatologiques plus graves, ou même de l'utiliser en combinaison avec d'autres modalités après des procédures cosmétiques plus invasives, NeoGenEVO vous permet de créer des protocoles sur mesure, adaptés aux exigences et aux attentes spécifiques de chaque patient.

Plus que la valeur nominale

Grâce aux faibles coûts des consommables, aux temps de traitement efficaces et à une gamme étendue de possibilités de traitement, il est facile de maximiser le rendement du **NeoGenEVO**.

Offrez à vos patients quelque chose de nouveau, d'exclusif et de très efficace en sachant que le système **NeoGenEVO** peut traiter un large éventail de types de peau et d'indications :

- Coûts d'exploitation minimes, encore améliorés grâce à un entretien régulier de votre appareil NeoGenEVO.
- Temps de traitement réduit. Réalisez un traitement en seulement 20 minutes pour une planification efficace et maximisez votre disponibilité.
- Des consommables limités, composés uniquement de buses et d'azote gazeux, dont le coût ne représente que 5 à 10 % des recettes générées par les traitements.
- Proposer des forfaits de traitement sur mesure. Réalisez un seul traitement à haute énergie à un prix élevé, ou proposez une série de traitements à faible énergie à l'heure du déjeuner.
- Interface utilisateur personnalisée avec connexion double utilisateur protégée par mot de passe. Le personnel expérimenté peut effectuer des traitements à haute énergie tandis que le personnel moins expérimenté peut toujours accéder à l'interface utilisateur. dispositif permettant d'effectuer des traitements à faible énergie afin de limiter les temps d'arrêt de l'appareil
- Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de protection ou d'opérer dans un environnement contrôlé, comme c'est le cas avec les technologies laser.



Résultats du NeoGenEVO

01 Images avec l'aimable autorisation d'Andrea Botha, SA



02 Avec l'aimable autorisation de Dr Rasha Clinic, UK



03 Avec l'aimable autorisation de Grafton Spa, UK



04 Images reproduites avec l'aimable autorisation d'Eden Clinic, Royaume-Uni



05 Avec l'aimable autorisation du Dr Raj Thethi, Yorkshire Skin Centre, Royaume-Uni.



06 Avec l'aimable autorisation de BodySculpt, UK



"NeoGen a un effet thermique sans précédent, je pense qu'il s'agit d'une technologie révolutionnaire pour la régénération de la peau.

Le lifting de la paupière supérieure est un avantage dans la pratique clinique, c'est aussi l'une de ses caractéristiques. Les études montrent qu'il est sûr et qu'il n'abîme pas les yeux".

DR ZHANG, MÉDECIN-CHEF ADJOINT

DÉPARTEMENT DE COSMÉTOLOGIE LASER,
HÔPITAL POPULAIRE DE SHANGHAI, CHINE

NEO
GEN

Technologie du plasma d'azote

Votre équipe de soutien



Lorsque vous choisissez **NeoGenEVO**, nous vous accompagnons à chaque étape afin de vous garantir une expérience de premier ordre pour vous et vos patients.

Technique

Nous nous engageons à fournir le programme de service le plus complet de l'industrie, pour que vous ayez l'esprit tranquille et que votre appareil fonctionne sans problème, en minimisant les temps d'arrêt et en maximisant vos profits.

Marketing

Nous veillerons à ce que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur, de l'accès à un large éventail de ressources, y compris des images avant et après et des brochures, à l'assistance en matière de marketing numérique.

Service à la clientèle

Notre équipe expérimentée de service à la clientèle est à votre disposition pour vous garantir une expérience sans faille avec votre **NeoGenEVO** dès le début, de l'aide à l'installation jusqu'à la livraison. de la commande de consommables à la prise de rendez-vous pour l'entretien.

Formation

Nos formateurs de produits, leaders dans leur secteur, proposeront un programme de premier ordre en interne, avec un accès permanent à des ressources en ligne et à des ateliers supplémentaires, afin d'améliorer constamment vos connaissances et l'expérience de vos patients.



0,8J, 3 traitements



Technologie du plasma d'azote

Spécification du produit

Classification de l'appareil : Classe IIb

Gamme d'énergie : 0,5 J - 4,0 J

Fréquence du pouls : Pouls unique

Taux de répétition : 1,0-2,5 Hz

Buses : 25mm/5mm

Alimentation : 100-120/230Vrms - 50/60Hz - 650Va

Dimensions : 470 x 430 x 1060 mm : 470 x 430 x 1060mm

Exigences en matière de gaz : Médical/Pharmaceutique/Instrument
azote de qualité

Poids du système : 18kg/40lb

Poids du chariot : 25kg/55lb (sans le réservoir de gaz)

Environnement ambiant : 0 à 40 Celsius

Humidité relative : 30 à 75%

Pression atmosphérique : 70,0 à 106,0 kpa

Contactez nous

NEOGEN France

Anthony COHEN
+33 6 38 68 84 32
loktal75008@gmail.com

NeoGenEVO



NeoGenPlasma_officiel



NeoGenPlasmaOfficiel



NeoGenPlasma

Scanner la QR
pour plus d'informations



* NeoGenEVO est certifié en tant que dispositif médical dans l'Union européenne en vertu du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 par SGS CE1639, exclusivement pour la ou les indications de cicatrices d'acné et de kératoses actiniques. Les autres utilisations attribuées à ce dispositif n'entrent pas dans le champ d'application de la certification CE, et les utilisateurs doivent être conscients que les performances et/ou la sécurité du produit n'ont pas été évaluées par SGS à ces fins.

** Autorisé par la FDA pour NeoGenPSR, spécification technique équivalente à NeoGenEVO.